

Klassik-Konso Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten

Maximale Flexion von **140°**

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ Winkelanpassungen von **0°** bis **40°** in 5° Schritten

Zum besseren Trennen der Oberschenkelhülle von der Unterschenkelhülle **auch mit geradem Unterteil erhältlich**

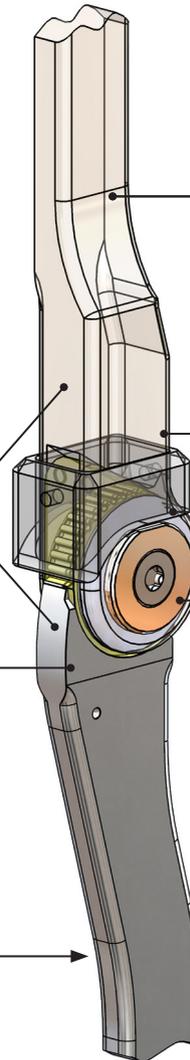


Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität


Montiert mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

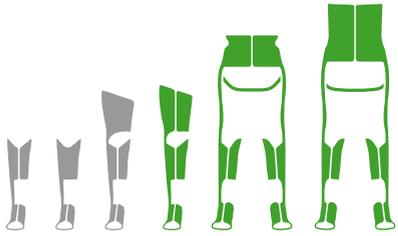

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

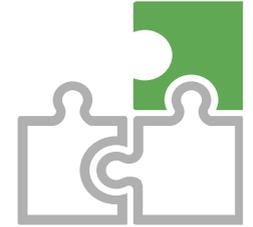

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)		Gelenk	Breite	Stärke	Stärke Fallschloß
	KAFO	HKAFO/RGO				
Klassik-Konso-22	bis 10 kg	bis 10 kg		22 mm	10,5 mm	15,0 mm
Klassik-Konso-25	bis 20 kg	bis 15 kg		25 mm	13,0 mm	16,5 mm
Klassik-Konso-28	bis 30 kg	bis 20 kg		28 mm	15,0 mm	19,5 mm
Klassik-Konso-30	bis 35 kg	bis 30 kg		30 mm	16,0 mm	20,5 mm
Klassik-Konso-32	bis 50 kg	bis 40 kg		32 mm	17,0 mm	21,0 mm
Klassik-Konso-36	bis 70 kg	bis 50 kg		34 mm	17,0 mm	21,0 mm
Klassik-Konso-40	bis 85 kg	bis 65 kg		40 mm	21,0 mm	26,0 mm
Klassik-Konso-40-Plus	bis 85 kg	bis 85 kg		40 mm	22,0 mm	28,0 mm

Klassik-Konso mit Schwung | Klassik-Konso gerade

 gesperrt	 Streckung in 40°	 Beugung in 140°	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	 kein Feilen nötig	geräuschgedämpft	 wasserbeständig
--------------	----------------------	---------------------	---------------	---------	--------------------	-----------------------	------------------	---------------------