

# Konso Kniegelenk



## Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patienten

Funktionserweiterung mit den Zusätzen  
**Move-N** oder **Move-S**

Maximale Flexion von **140°**

Mit **kurzem Anker** oder **langem  
Stabilitätsträger** zur Befestigung

+ Mit einer **Kröpfung von 5°** des Oberschenkels nach außen

Mit **federndem Druckstück** zur optionalen  
temporären Öffnung der Sperre

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ **Winkelanpassungen** von **0°** bis **40°** in **5°** Schritten

Zum besseren Trennen der Oberschenkelhülse  
von der Unterschenkelhülse **auch mit geradem  
Unterteil erhältlich**

## Basis

**Komplett montiert** als Einheit für einen übersichtlichen  
Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte  
Bestellung

**Optimale Kraftübertragung** zur Orthese mit gefrästem  
Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

**Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel** für mehr Stabilität

**Montiert** mit selbstschmierenden und auf hundertstel  
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

**Wartungsfreie Gelenkverschraubung** aus Edelstahl mit  
Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



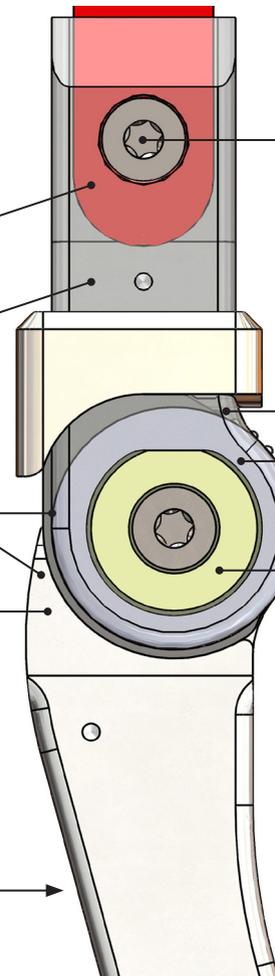


Abb. links

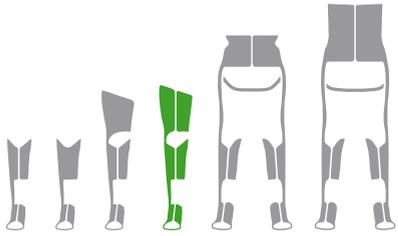


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.  
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

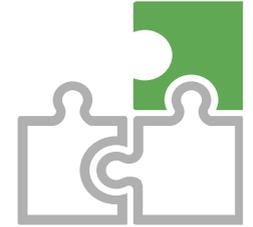

**Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)**

**Gelenk**

Artikel-Nr.	KAFO	Breite	Stärke	Stärke Fallschloß
Konso-25	bis 20 kg	25 mm	14,5 mm	17,5 mm
Konso-28	bis 30 kg	28 mm	16,5 mm	20,5 mm
Konso-30	bis 35 kg	30 mm	17,5 mm	21,5 mm
Konso-32	bis 50 kg	32 mm	19,5 mm	23,0 mm
Konso-36	bis 70 kg	36 mm	20,5 mm	24,0 mm
Konso-40	bis 85 kg	40 mm	22,0 mm	26,0 mm

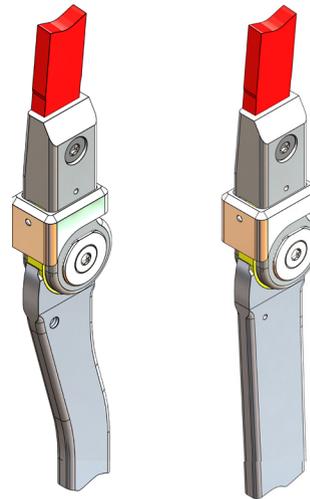

Konso mit Schwung | Konso gerade

