

# Jumper Knöchelgelenk



## Ausstattung

Für **kleine** bis **größte** Patienten

Durch das Wechselkeilsystem **kein Feilen** notwendig

+ **Sichere fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase** durch anhaltenden Reibungswiderstand ohne Federmechanik

+ **Weiche Fersenabrollung**


Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium, Titan oder Edelstahl**

Die gefrästen Winkel der Messingkeile garantieren eine **gleichbleibende Bewegungsbegrenzung** über die gesamte Tragdauer der Orthese

Bis **12°** Dorsalflexion und **12°** Plantarflexion

**Geräuschkämpfung** für höhere Patientenakzeptanz

**Hohe Steifigkeit** durch **Aluminium** oder **Edelstahl** Fußbügel

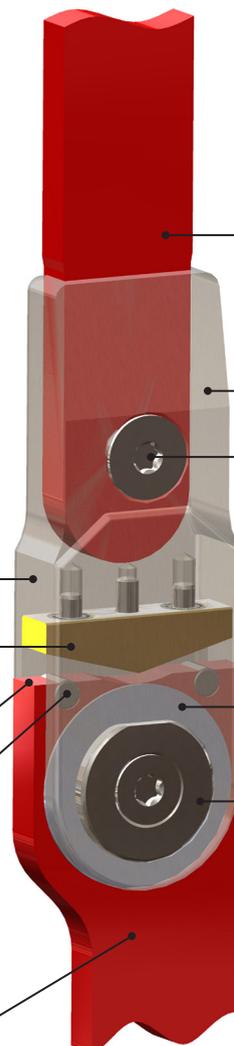

## Basis

**Komplett montiert** als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Mit **kurzem Anker** oder **langen Stabilitätsträger** zur Befestigung

**Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel** für mehr Stabilität

**Optimale Kraftübertragung** zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

**Montiert** mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

**Wartungsfreie Gelenkverschraubung** aus Edelstahl mit Bronzefuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.  
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

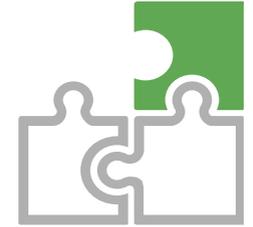

**Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)**

**Gelenk**

**Material**

Artikel-Nr.	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk	Material			
	AFO	KAFO	HKAFO/RGO		Breite	Stärke	Gabel	Fußbügel
Jumper-22	bis 15 kg	bis 15 kg	bis 15 kg		22 mm	12,0 mm	Al	Al
Jumper-25	bis 25 kg	bis 25 kg	bis 25 kg		25 mm	13,0 mm	Al	Al
Jumper-28	bis 35 kg	bis 35 kg	bis 35 kg		28 mm	13,0 mm	Al	Al
Jumper-32	bis 50 kg	bis 50 kg	bis 50 kg		32 mm	19,0 mm	Al	Al
Jumper-34	bis 70 kg	bis 70 kg	bis 65 kg		34 mm	16,0 mm	Al	Al
Jumper-34-Plus	bis 70 kg	bis 70 kg	-		34 mm	16,0 mm	Ti	Al
Jumper-34-extra	bis 70 kg	-	-		34 mm	16,0 mm	V2A	V2A
Jumper-38	bis 85 kg	bis 85 kg	bis 90 kg		38 mm	20,0 mm	Al	Al
Jumper-38-Plus	bis 85 kg	bis 90 kg	-		38 mm	20,0 mm	V2A	Al
Jumper-38-extra	bis 110 kg	-	-		38 mm	20,0 mm	V2A	V2A

<p>Lotaufbau</p>	<p>modular</p>	<p>Kraftunterstützung</p>	<p>Bewegungs- begenzung</p>	<p>Schwungphase</p>	<p>Schnelle Anpassung</p>	<p>Wechselkeil</p>	<p>kein Feilen nötig</p>	<p>Geräusch gedämpft</p>	<p>wasserbeständig</p>
------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------